

萊登

视标投影仪

NP-3S



迅速和安静

由于一眨眼就可完成选择所需视标，所以不产生使人不愉快的噪音，可以进行迅速、安静的检查。

程序设计

根据患者的要求，您可以编制检查顺序，以便更顺利地检查。可输入2个程序，每个程序含16张视标。

遮蔽和红-绿覆盖

每个遮蔽类型可提供横向、纵向或逐字型遮蔽。另外，所有视标可与红-绿覆盖一起使用。



横向和逐字型遮蔽也可使用。



球形脚

由4个球形脚，不管哪边也可随便调节投影方向。

焦点固定型

当投影仪和患者处于离视标屏幕距离相同的位置时，该投影仪自动产生尺寸正确的视标影像。

用聚焦刻度盘可以将更鲜明的视标影像投影在屏幕上。该刻度盘位于投影仪下面，实现容易操作。



焦点可变型

不管患者的位置，可以随便放置投影仪。为了得到所需的视标尺寸，可以手动调节可变焦距透镜。

不管折射距离，也可随便放置投影仪来得到明亮、鲜明的影像。



标准视标

可以利用下列4套视标组。除其他任选视标用空位以外，这些视标基于其重要性和使用频数被精选的。

数字视标
4个任选空位

- 焦点固定型
- 半透明遮蔽
- 1.0



欧洲 II 视标
1个任选空位

- 焦点固定型
- 不透明遮蔽
- 1.0



斯内伦数字视标
4个任选空位

- 焦点固定型和焦点可变量型都可用。
- 半透明遮蔽
- 20/20




多视标 (美国)
4个任选空位

- 焦点可变量型
- 不透明遮蔽
- 20/20



注意：* 对于带星号的视标也可以遮蔽。□ 只能利用横向遮蔽。

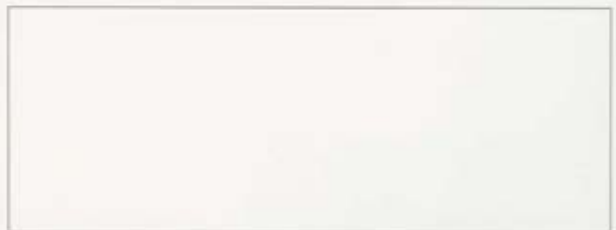

销售
株式会社 来易特制作所
总公司·营业部
邮编: 174-8633 东京都板桥区前野町1-47-3
TEL: +81-3-3960-2275 FAX: +81-3-3960-2285
E-mail: eigyousitsu@rightmfg.co.jp